

(Diagnostic Reagent Grade)

T-141

HEXOKINASE [HK III]

from *Rhodothermus obamensis*
(ATP: D-hexose-6-phosphotransferase, EC 2.7.1.1)



Preparation and Specification

Appearance : White to light grayish lyophilized powder
Specific activity : More than 100 U/mg solid

Properties

Substrate specificity	: See Table 1	
Molecular weight	: 140 kDa (gel filtration)	
Michaelis constants	: Glucose 0.46 mM ATP 0.21 mM	
Optimum pH	: 7.5–8.0	Figure 1
pH stability	: 5–10	Figure 2
Thermal stability	: Stable at 75°C and below (pH8.5, 10 min)	Figure 3

Applications for Diagnostic Test

This enzyme is useful for enzymatic determination of **glucose or creatine kinase activity** when coupled with glucose-6-phosphate dehydrogenase (T-51).

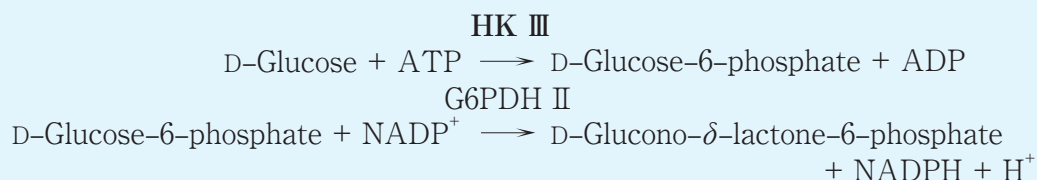


Table 1. Substrate specificity

Substrate	Relative activity (%)
Glucose	100
Mannose	27
Glucosamine	66
2-deoxy-D-glucose	37
Galactose	11
1,5-AG	3
Fructose	0
Sorbitol	0
Saccharose	0

Fig.1 pH Optimum

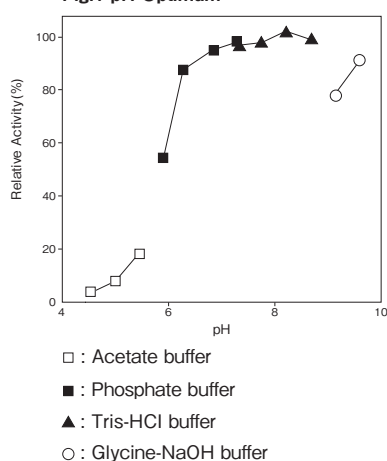


Fig.2 pH Stability


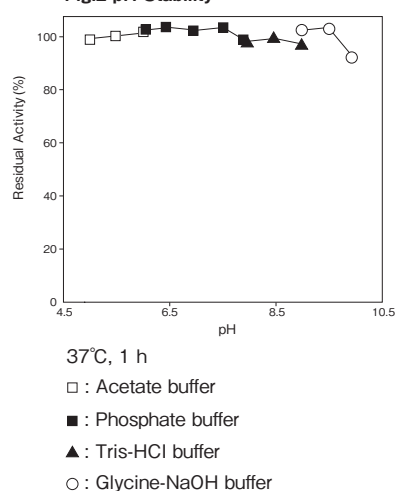



Fig.3 Thermal Stability

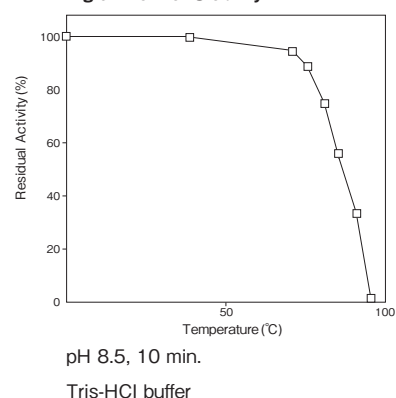

Assay

Principle

The assay is based on the increase in absorbance at 340 nm as the formation of NADPH proceeds in the following reactions:

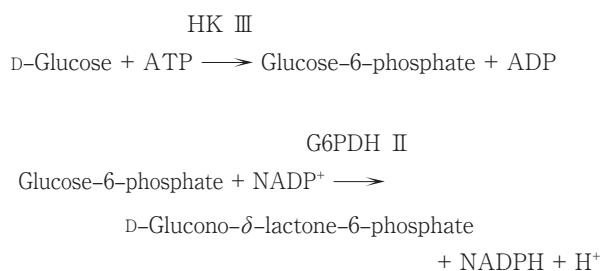

ATP: Adenosine triphosphate

NADP: Nicotineamide adenine dinucleotide phosphate

G6PDH II : Glucose - 6 - phosphate dehydrogenase

Unit definition

One unit is defined as the amount of enzyme which generates 1 μmole of NADPH per minute at 37°C under the conditions specified in the assay procedure.

Reagents

- Reaction mixture

0.2 M Tris - HCl buffer pH 8.0	0.6 ml
0.1 M Glucose solution	0.3 ml
40 mM ATP solution pH 7.0	0.3 ml
100 U/ml G6PDH II solution ¹⁾	0.3 ml
10 mM NADP solution	0.3 ml
0.1 M MgCl_2 solution	0.3 ml
Distilled water	0.9 ml

1): 100 U/ml G6PDH II solution

Disolve 1,000 U of G6PDH with 10 ml of 10 mM Tris-HCl buffer pH 8.0.

- Enzyme dilution buffer

0.1M KH_2PO_4 -NaOH buffer pH 7.0 containing 0.1 % (W/V) BSA and 0.1 % (W/V) Triton X-100.

- Reagents

Triton X-100: The Dow Chemical Company

NADP (oxidized form) :

FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation
308-50463

G6PDH II : Nagase Diagnostics Co., Ltd. # T-51

ATP ($2\text{Na} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) : Kyowa Hakko Co., Ltd.

BSA: Millipore Fraction V pH 5.2 # 81-053

■ Enzyme solution

Accurately weigh about 20 mg of the sample and add enzyme dilution buffer to make a total of 20 ml. Dilute it with enzyme dilution buffer to adjust the concentration as required.

■ Procedure

1. Pipette accurately 3.0 ml of reaction mixture into a small test tube and preincubate at 37°C.
2. After 5 min, add exactly 50 μ l of enzyme solution and mix to start the reaction at 37°C.
※ In the case of a test blank, add 50 μ l of enzyme dilution buffer in place of enzyme solution.
3. After starting the reaction, measure the rate of increase per minute in absorbance at 340 nm. The rate must be measured within the linear portion of the absorbance curve.

Absorbance sample :As/min

blank :Ab/min

$$\Delta A/\text{min} = (\text{As}/\text{min} - \text{Ab}/\text{min}) \leq 0.030 \text{ Abs}/\text{min}$$

■ Calculation

$$\text{Activity (U/mg of powder)} = \frac{\Delta A/\text{min}}{6.22} \times \frac{3.05}{0.05} \times \frac{1}{X}$$

6.22 : millimolar extinction coefficient of NADPH at 340 nm
($\text{cm}^2 / \mu\text{mole}$)

3.05 : final volume (ml)

0.05 : volume of enzyme solution (ml)

X : concentration of the sample in enzyme solution
(mg/ml)

Storage

Storage at -20°C in the presence of a desiccant is recommended.

References

1. Colowick, S. P. (1973) The Enzymes (3rd Ed.) , 4, 1-48.
2. Barnard, E. A. (1975) Methods Enzymol., 42, 6-25.
3. Wright, C. L. and Warsy, A. S. (1978) Biochem. J., 175, 125-135.
4. Li SJ, Umena Y, Matsvoka T, Kita A, Fukui K, and Morimoto Y. (2007) Biochem. Biophys. Res. commun., 358, 1002-1007.

H K Ⅲ 活性測定法 (Japanese)

I. 試薬液

1. 反応試薬混合液

0.2M トリス-HCl 緩衝液 pH8.0	0.6 ml
0.1M グルコース溶液	0.3 ml
40mM ATP 溶液 pH7.0	0.3 ml
100U/ml G6PDH II 溶液 ¹⁾	0.3 ml
10mM NADP 溶液	0.3 ml
0.1M 塩化マグネシウム溶液	0.3 ml
精製水	0.9 ml

1): 100U/ml G6PDH II 溶液

G6PDH II 1,000 単位 (U) を 10mM トリス-HCl 緩衝液 pH8.0 10ml で溶解する。

2. 酵素溶解希釈用液

0.1% (W/V) BSA と 0.1% (W/V) トリトン X-100 を含む 0.1M KH_2PO_4 -NaOH 緩衝液 pH7.0

3. 試薬

トリトン X-100: Dow Chemical 製

NADP (ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド・リン酸化型):

富士フイルム和光純薬製 #308-50463

G6PDH II (グルコース-6-リン酸脱水素酵素):

ナガセダイアグノスティックス製 #T-51

ATP (アデノシン三リン酸 $\cdot 2\text{Na}\cdot 3\text{H}_2\text{O}$):

協和発酵製

BSA: Millipore 製 Fraction V pH5.2 #81-053

II. 酵素試料液

検品約 20mg を精密に量り、酵素溶解希釈用液で溶解して全溶 20ml とする。

その液を酵素溶解希釈用液で適宜希釈する。

III. 測定操作法

1. 小試験管に反応試薬混合液 3.0ml を正確に分注し、 37°C で予備加温する。

2. 5 分経過後、酵素試料液 50 μ l を正確に加えて混和し、 37°C で反応を開始する。

※盲検は酵素試料液の代わりに酵素溶解希釈用液 50 μ l を加える。

3. 反応開始後、340nm における吸光度を測定して直線的に反応している 1 分間当たりの吸光度変化を求める。

求められた吸光度変化の試料液は As/min、盲検液は Ab/min とする。

$$\Delta A/\text{min} = (\text{As}/\text{min} - \text{Ab}/\text{min}) \leq 0.030 \text{ Abs}/\text{min}$$

IV. 計算

$$\text{活性 (U/mg)} = \frac{\Delta A/\text{min}}{6.22} \times \frac{3.05}{0.05} \times \frac{1}{X}$$

6.22 : NADPH の 340nm におけるミリモル分子吸光係数
($\text{cm}^2 / \mu\text{mole}$)

3.05 : 反応総液量 (ml)

0.05 : 反応に供した酵素試料液量 (ml)

X : 酵素試料液中の検品濃度 (mg/ml)